

NAVINA INSERT QUICK GUIDE


Viktig information:

Navina Insert är avsett att användas för hantering av avföringsläckage på grund av avföringsinkontinens. Navina Insert skall endast användas efter förskrivning. Innan användning, säkerställ att de råd och instruktioner du fått av vårdpersonalen följs. Läs bruksanvisningen i förpackningen för viktig säkerhetsinformation och fullständiga instruktioner. Kontakta din förskrivare om du upplever problem.


Så här sätter du in Navina Insert:




1. Tvätta händerna.

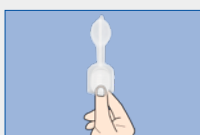


2. Öppna förpackningen och tag ut produkten.

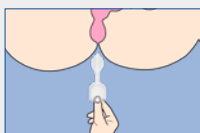

3. Hitta en avslappnad och bekväm position, som t.ex liggande på sängen. Håll den glidbehandlade analproppen med hjälp av den vita applikatorn i plast och rikta den övre rundade delen mot ändtarmsöppningen.

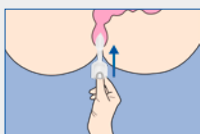

4. Slappna av och för försiktigt in analproppen tills handtaget vilar mot ändtarmsöppningen.

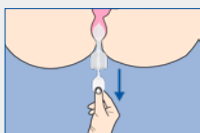


5. Avlägsna applikatorn och släng den i hushållsavfallet.



6. Tvätta händerna.


Så här tar du ut Navina Insert:

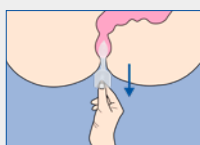

1. Ta tag i handtaget och dra försiktigt ut analproppen.



2. Släng produkten i hushållssoporna. Spola INTE ner analproppen eller applikatorn i toaletten.

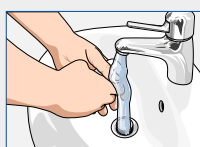

1. Tvätta händerna.

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvalitén för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric[®] och Navina[™]. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. A Real Difference.

För mer information om våra produkter och tjänster, besök [Wellspect.se](https://wellspect.se)

Följ oss också på LinkedIn, Twitter, Facebook och Instagram.

wellspect.se

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal. Tel: 031 376 40 00.

Navina Fecal Incontinence Insert



Tillverkare:
Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest
Stewartville, MN 55976 USA
507-533-0366
<http://www.mnmedicaltechnologies.com/>

Importör:
Wellspect HealthCare
Aminogatan 1
Box 14, 431 21 Mölndal,
www.wellspect.com

MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
Braunfels 35619
Germany