

NAVINA INSERT QUICK GUIDE


Viktig informasjon:

Navina Insert er beregnet for behandling av ufrivillig tarmlekkasje. Navina Insert skal kun brukes etter avtale med helsepersonell. Før bruk må du sørge for at du følger de råd og instruksjoner om prosedyren du har fått av helsepersonell. Les brukerveiledningen i pakningen for å få viktig sikkerhetsinformasjon og fullstendige instruksjoner. Kontakt lege eller sykepleier hvis du opplever noen problemer.


Innføring:




1. Vask hendene dine.

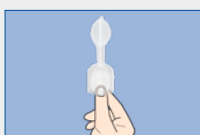


2. Åpne pakken og ta ut enheten.

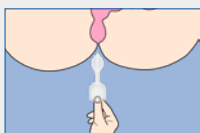

3. Plasser deg i en avslappet og behagelig stilling, for eksempel liggende på sengen eller sittende på toalettet. Hold den hvite applikatoren og plasser spissen av den ferdigsmurte pluggen ved anus.

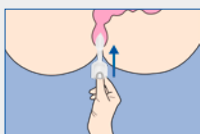

4. Slapp av i muskulaturen og før pluggen forsiktig inn til håndtaket er ved anus.

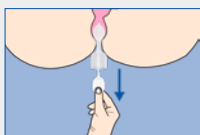


5. Trekk applikatoren ut, og kast den sammen med innpakningen i restavfall.



6. Vask hendene dine.

Uttagelse:

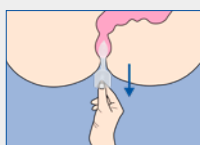

1. Ta tak i det utvendige håndtaket og trekk forsiktig for å fjerne pluggen.



2. Kast pluggen i vanlig restavfall. Det anbefales ikke å skylle hetten eller applikatoren ned i toalettet.



3. Vask hendene dine.

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi hjelper våre brukere til en bedre selvfølelse og mer uavhengighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 40 år med varemerkene LoFric® og Navina™. Vi har som mål å minimere miljøpåvirkningen av produktene våre og streber lidenskapelig etter å bli klimanøytrale. Vi jobber sammen med brukere og helsepersonell for bedre klinisk resultat på en bærekraftig måte, nå og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk Wellspect.no.

Bli med oss på LinkedIn, Twitter, Facebook and Instagram.

Wellspect.no

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Country. Phone: +47 815 59 118.

Navina Fecal Incontinence Insert



R_x Only



Fremstillet:
Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest
Stewartville, MN 55976 USA
507-533-0366
<http://www.mnmedicaltechnologies.com/>

Importør:
Wellspect HealthCare
Aminogatan 1
P.O Box 14, SE-431 21
Mölnådal, Sweden.
www.wellspect.com

MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
Braunfels 35619
Germany