

NAVINA INSERT PIKAOPAS


Tärkeää tietoa:

Navina Insert on tarkoitettu tahattoman ulosteen karkailun hoitoon. Navina Insert rektaalitamponia saa käyttää vain terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksen jälkeen. Varmista ennen käyttöä, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen antamia neuvoja ja ohjeita. Lue pakkauksessa oleva käyttöohje tärkeiden turvallisuustietojen ja täydellisten ohjeiden saamiseksi. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.


Asettaminen:




1. Pese kädet.

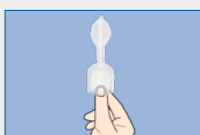


2. Avaa pakkaus ja ota tamponi pakkauksesta.

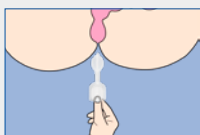

3. Pidä kiinni valmiiksi liukastetun tamponin valkoisesta muovisesta asettimesta ja kohdista tamponin kärki kohti peräaukkoa.

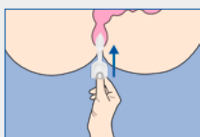

4. Rentouta lihakset ja aseta varovasti Navina Insert, kunnes pidin lepää peräaukossa.

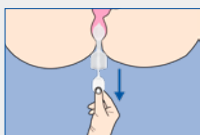


5. Vedä asetin pois ja hävitä asetin ja pakkaus kotitalousjätteen mukana.



6. Pese kädet.


Poistaminen:

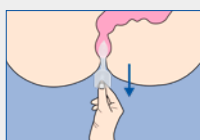

1. Tartu ulkoiseen pitimeen ja vedä rektaalitamponi ulos varovasti.



2. Hävitä tuote kotitalousjätteen mukana. Tuotteen tai asettimen huuhtelua wc-pönttöön ei suositella.

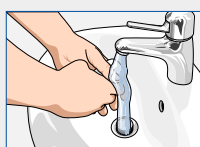

3. Pese kädet.

Me Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja rakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkiemme ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoisena tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta Wellspect.fi.

Osallistu keskusteluun Facebookissa, X:ssä, Instagramissa ja LinkedInissä.

wellspect.fi

Wellspect Oy, Miestentie 9 C, 02150 Espoo. Puhelin: 09 867 6160.

Navina Fecal Incontinence Insert



R_x Only



Valmistaja:
Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest
Stewartville, MN 55976 USA
507-533-0366
<http://www.mnmedicaltechnologies.com/>

Maahantuoja:
Wellspect HealthCare
Aminogatan 1
P.O Box 14, SE-431 21
Mölnådal, Sweden.
www.wellspect.com

MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
Braunfels 35619
Germany