

**Tukeva asettuminen**

Leveä ulkoinen pidike taipuu mukavasti ja on suunniteltu pitämään tuote tukevasti paikallaan.

**24 tunnin käyttöaika**

Voidaan käyttää yhtäjaksoisesti jopa 24 tunnin ajan, joka mahdollistaa itsenäisen ja aktiivisen elämän.

**Helppokäyttöinen**

Asetin helpottaa asettamista.

**Joustavuus ja mukavuus**

Navina Insert on valmistettu pehmeästä silikonista ja täytetty nesteellä, huolellisen muotoilun ansiosta se on miellyttävä käyttää ja mukautuu kehoon.


**Hygieeninen**

Suojaava holkki hygienian parantamiseksi.


# PEHMEÄ ANAALITAMPONI, JOKA ON SUUNNITELTU MUKAVAKSI

Navina Insert on pehmeä ja joustava rektaalitamponi, joka on suunniteltu tarjoamaan täydellisen esteen ohivuotoon peräsuolesta, jopa 24h ajan. Se on hygieeninen ja valmistettu pehmeästä silikonista ja siinä käytetään nestedynamiikka, joka mahdollistaa tuotteen mukautumisen ja asettumisen kehoon.


## Käyttöohje

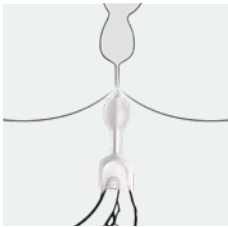


1. Pidä kiinni valmiiksi liukastetun tamponin valkoisesta muovisesta asettimesta ja kohdista tamponin kärki kohti peräaukkoa.

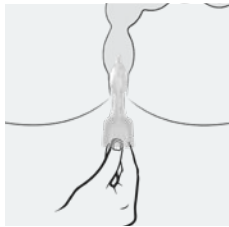

2. Aseta tamponi varovasti sisään, kunnes pidin lepää peräaukossa. Vedä asetin pois, hävitä asetin ja pakkaus sekajätteen mukana.

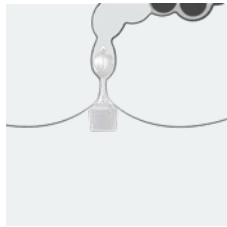

3. Nestetäytteinen tamponi mukautuu kehoon ja auttaa estämään ohivuotoa peräsuolesta.

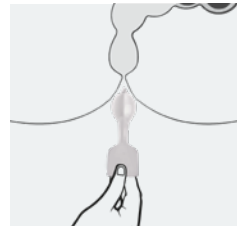

4. Poista tarttumalla ulkoiseen pitimeen ja vetämällä varovasti ulos, hävitä sekajätteen mukana.

| Tuotenumero | Tuote                         | Tuoteseloste                 | Käyttökerrat    |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 6930400     | Navina Insert, Standard       | 30 kpl                       | Kertakäyttöinen |
| 6930500     | Navina Insert, Large          | 30 kpl                       | Kertakäyttöinen |
| 6930600     | Navina Insert, aloituspakkaus | 5 Standard ja 5 Large -kokoa | Kertakäyttöinen |



#### Navina Bowel Care

Tiedämme, että samanlainen suolenhallintaratkaisu ei sovi kaikille ja siksi olemme yllpeitä voidessamme tarjota monipuolisia ratkaisuja kunkin yksilön tarpeisiin, kaikki yhden tuotemerkin alla, joka takaa sinulle saman laadun, helppokäyttöisyyden ja joustavuuden tuotevalinnasta riippumatta.

Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja virtsarakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkimme ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoina tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

#### Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta Wellspect.fi.

Osallistu keskusteluun LinkedInissä, X:ssä, Facebookissa ja Instagramissa.

**wellspect.fi**

Wellspect Oy, Miestentie 9 C, 02150 Espoo. Puhelin: 09 867 6160.

#### Navina Fecal Incontinence Insert



R<sub>x</sub> Only



Valmistaja:  
Minnesota Medical Technologies  
2446 Henry Road Northwest  
Stewartville, MN 55976 USA  
507-533-0366  
www.mnmedicaltechnologies.com  
540035 Rev 1

Maahantuoja:  
Wellspect HealthCare  
Aminogatan 1  
P.O. Box 14, SE-431 21  
Mölnådal, Sweden.  
www.wellspect.com

MPS Medical Product Service GmbH  
Borngasse 20  
Braunfels 35619  
Germany